
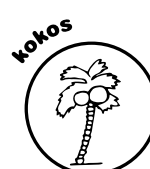


Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Wyrób należy użytkować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji. W przypadku wątpliwości lub uzyskania dodatkowych informacji należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Instrukcja użytkowania

Materac Gryko Lux PRESTIGE Line

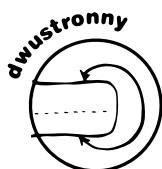


Opis wyrobu:

Materac z naturalną łuską gryczaną może być stosowany podczas snu i odpoczynku, przez osoby zdrowe oraz alergików. Przeznaczony jest również dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na regularny ruch czy też częste zmiany pozycji ciała. Może być stosowany w profilaktyce, wspomagającym leczeniu oraz rehabilitacji wielu schorzeń narządu ruchu, układu nerwowego i chorób naczyń obwodowych. Może być również stosowany jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny, a w szczególności w profilaktyce chorób alergicznych, a także w prewencji osób dotkniętych nadmierną reakcją na alergeny wziewne i kontaktowe. Zawarta w gryce tanina wykazuje działanie przeciw roztoczowe i bakteriostatyczne, lecz nie przenika przez skórę człowieka. Zapobiega rozwojowi roztoczy i bakterii, które mogą dostać się do materaca lub innych wyrobów. Inne związki chemiczne zawarte w łusce gryki wykazują również korzystne działanie na powierzchnię skóry.

Materac Gryko Lux PRESTIGE Line to dwustronny materac, składający się z sześciu niezależnych warstw:

1. Trójwarstwowego pokrowca (konstrukcja 3W) wykonanego z dzianiny materacowej (100% poliester), puszystej włókniny poliestrowej i płaskiej włókniny polipropylenowej.
2. Niezależnego wkładu z naturalnej łuski gryczanej (naturalna łuska gryczana, włóknina polipropylenowa).
3. Pianki poliuretanowej.
4. Puszystej włókniny poliestrowej.
5. Włókna kokosowego łączonego mieszanką lateksową (maty kokosowej).
6. Płaskiej włókniny polipropylenowej.

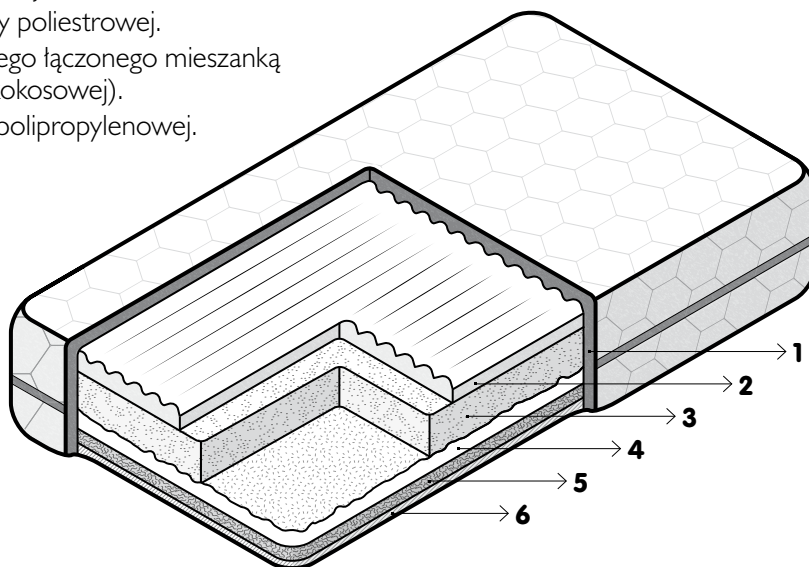

Właściwości pokrowca:

Pokrowiec można bardzo łatwo zdjąć i założyć. Przystosowany jest do prania w pralce w temperaturze 60°C, wirowania i suszenia w suszarkach bębnowych. Trójwarstwowy pokrowiec (konstrukcja 3W) wykonany jest z połączonej ze sobą dzianiny materacowej (100% poliester), włókniny poliestrowej i włókniny polipropylenowej.



Przewidziane zastosowanie wyrobu:

W normalnych warunkach użytkowania materac przeznaczony jest do wielokrotnego stosowania u dzieci:

- w profilaktyce i zapobieganiu wadom postawy,
- w zapobieganiu przeciążeniom kręgosłupa, związanych z wymuszoną pozycją ciała podczas spania,
- wspomagająco w przeciwdziałaniu zaburzeń snu,
- w profilaktyce i wspomagającym leczeniu dzieci z alergią na roztocza kurzu domowego^{*)},
- w dysfunkcjach narządu ruchu w chorobach układu nerwowo-mięśniowego u dzieci (np. mózgowie porażenie dziecięce, nagminne porażenie dziecięce, porodowe uszkodzenie splotu ramiennego).

Wyrób może być również stosowany we wczesnej profilaktyce u dzieci z wysokim ryzykiem rozwoju odleżyn.

^{*)} jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny, a w szczególności w profilaktyce chorób alergicznych, a także w prewencji osób dotkniętych nadmierną reakcją na alergeny wziewne i kontaktowe.

Czy wiesz że:

Według najnowszych międzynarodowych wytycznych i standardów leczenia oraz profilaktyki chorób alergicznych zaleca się wielokierunkowe działania zmierzające do ograniczenia ekspozycji na alergeny. Wskazane jest:

- Pranie pościeli, poduszek, koców, pokrowców materaców, pluszowych zabawek w temperaturze min. 55°C.
- Poddawanie pościeli i zabawek pluszowych okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażanie).
- Stosowanie pościeli antyalergiczej.
- Stosowanie środków roztoczobójczych.
- Zrezygnowanie z dywanów.

Sposób użytkowania:

- Wyrób należy stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz ze wskazówkami i zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.
- Wyrób jest nieinwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do wielokrotnego użytkowania przez jedną osobę.
- Wyrób przeznaczony jest do nieprzerwanego stosowania nie dłużej niż 24 godziny, w przypadku konieczności dłuższego użytkowania należy przewietrzyć wyrób.
- W przypadku niemowląt, małych dzieci lub osób ze skórą wrażliwą, podatną na podrażnienia lub uczulenia, należy zastosować bawełniane prześcieradło.
- Przed pierwszym zastosowaniem wyrobu należy przeprowadzić procedurę prania pokrowca zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce.
- W celu zabezpieczenia wyrobu przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem należy zawsze stosować ochraniacz – nakładkę higieniczną.
- W przypadku zamoczenia lub zabrudzenia pokrowca należy niezwłocznie przeprowadzić standardową procedurę prania.
- W przypadku materacy dwustronnych, aby zapewnić ich prawidłowe działanie oraz wydłużyć ich użyteczność, należy okresowo przewracać materac, co najmniej raz na trzy miesiące.

- Należy właściwie dopasować wyrób do rozmiaru łóżka/ramy łóżka. Nie można dopuszczać do deformacji wyrobu poprzez jego zginanie, łamanie, rolowanie lub jakiegokolwiek inne działanie, które może doprowadzić do zmiany kształtu wyrobu.
- Nie można przenosić materaca wraz z dzieckiem/pacjentem.
- Nie można doprowadzić do zawilgocenia lub przemoczenia wyrobu. Należy stosować jednorazowe nieprzemakalne podkłady, w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem lub przemoczeniem wyrobu.
- Ze względu na zawartość naturalnych składników, wyrób przechowywać w suchych, dobrze wentylowanych miejscach, pozbawionych kurzu, grzybów, a także szkodników magazynowych. Nie przechowywać bezpośrednio przy źródłach ciepła (np. grzejnikach, kaloryferach, etc.) i nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie narażać wyrobu na działanie wilgoci, niskich temperatur.
- W przypadku uszkodzenia, deformacji wyrobu lub stwierdzenia niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrób lub jego zabrudzony komponent na nowy.
- Materac przeznaczony jest do stosowania przez jedną osobę w warunkach domowych. Nie powinien być ponownie używany przez inne osoby. Przed ponownym użyciem przez inne osoby z powodów zdrowotnych i epidemiologicznych, pokrowiec należy poddać procesowi prania, a wkład z naturalną łuską gryczaną wymienić na nowy.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania do stosowania:

- Nie można stosować wyrobu, w przypadku wystąpienia podrażnień, zmian skórnych lub innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte, niezabezpieczone opatrunkiem rany lub owrzodzenia.
- Nie stosować wyrobu, jeśli ten typ profilaktyki, rehabilitacji lub wspomaganie leczenia jest niezgodny ze wskazaniami medycznymi lub jest niewystarczający.
- Nie można stosować wyrobu u osób, u których występuje uczulenie na jakikolwiek składnik wyrobu.

Przechowywanie i konserwacja:

- Materac należy transportować w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i zamoczeniem.
- Wyrób należy przechowywać w suchym pomieszczeniu z daleka od działania promieni słonecznych. W stałej temperaturze powietrza 20-26°C i wilgotności względnej 50%.
- Przed pierwszym zastosowaniem wyrobu należy przeprowadzić procedurę prania pokrowca zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce.
- Pokrowiec należy poddawać okresowej procedurze prania. Zalecane jest co najmniej jedno pranie co 6 tygodni, przy założeniu, że materac będzie stosowany wyłącznie z zalecaną ochronną nakładką higieniczną oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji.
- Pokrowiec przystosowany jest do prania w pralce w temperaturze 60°C i wirowania w max. 1000 obr./min.
- Nie można prać wkładu z naturalną łuską gryczaną. W przypadku zabrudzenia tego komponentu materaca należy wymienić go na nowy.

Dostępne rozmiary:

Wysokość: od 7 do 21 cm.



Szerokość: od 30 do 200 cm.

Długość: od 60 do 220 cm.

Materacyk



Baer Jacek Czarnecki Damian Spółka Jawna
ul. Grunwaldzka 14, 62-020 Swarzędz, Polska
tel.: + 48 61 652 68 29, fax: + 48 61 652 68 30

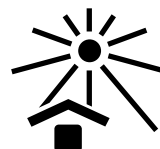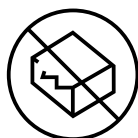

Numer i data wydania instrukcji: IU/FM/WM/Rev.0/07.2014

www.materacyk.pl